

Instrucțiuni de utilizare

Scaun de duș fără spătar - sistem TF

Codul produsului: TGR-R KP 340L



1. Execuție


Scaunul de duș este alcătuit dintr-un cadru din aluminiu și un scaun lat din PVC durabil. Are picioare reglabile pe înălțime, acoperite cu capace de cauciuc antiderapante și mânere laterale la scaun pentru o utilizare ușoară. Capacele picioarelor din cauciuc special concepute previn în mod eficient alunecarea pe suprafețe umede. Scaunul este echipat suplimentar cu sistemul TF pentru o asamblare ușoară.

Setul conține:

- scaun - 1 buc.
- baza scaunului - 2 buc.
- picioare reglabile în înălțime - 4 bucăți.
- șuruburi de montare (șuruburi fluture) - 5 buc.

Componente:

- A.** scaun
- B.** tuburi de bază pentru scaun
- C.** reglarea înălțimii- știft de blocare
- D.** capace antiderapante

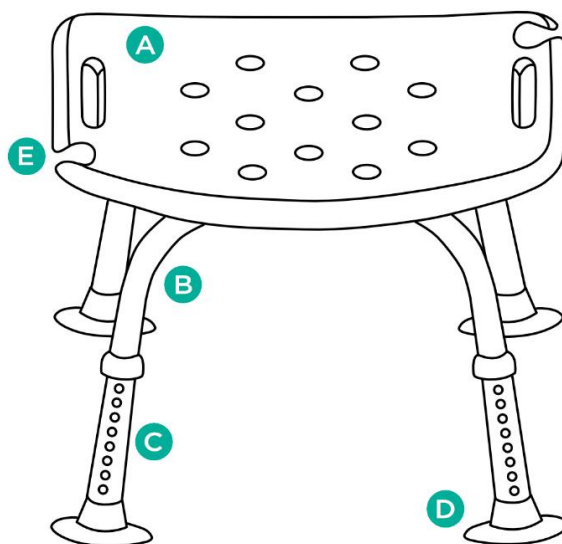

2. Domeniu de utilizare

Scaunul pentru duș este un accesoriu care facilitează utilizatorului efectuarea activităților de igienă. Recomandat pentru persoanele cu mobilitate redusă care le face imposibilă sau dificilă desfășurarea independentă a activităților de zi cu zi. Scaunul este recomandat pentru

utilizarea în dușuri, căzi, băi și alte spații umede, în mediul casnic și spitalicesc.

3. Montajul

Pasul 1. Așezați scaunul pe podea.

Pasul 2. Apoi, cu ajutorul a cinci șuruburi fluture cu șaibe, asamblați scaunul cu tuburile încrucișate ale bazei taburetului.

Pasul 3. Tuburile de la baza scaunului trebuie să fie conectate la picioare.

REGLAREA ÎNĂLȚIMII

- Pentru a regla înălțimea scaunului, împingeți știftul metalic, selectați înălțimea dorită a piciorului și apoi blocați poziția unul față de celălalt cu ajutorul știftului de blocare. Picioarele sunt reglabile în trepte de 2,5 cm.

Atenție! Știfturile din toate picioarele trebuie să fie așezate la același nivel.

4. Caracteristici tehnice:

Lățime	51 cm
Adâncime	39 cm
Înălțime	36-46 cm
Dimensiunile scaunului	49 x 29 cm
Greutate	2,06 kg
Sarcina maximă	136 kg

5. Note și recomandări

Firma Timago International Group nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a Scaunului, nerespectarea normelor de siguranță sau utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele prevăzute.

6. Întreținerea

- Scaunul trebuie curățat în mod regulat folosind apă, un burete și

agenți de curățare ușori pentru materiale plastice, de exemplu, săpun sau detergenți ușori omologați de PZH, și trebuie șters după fiecare utilizare.

- Nu folosiți pentru curățare: produse de detergenți puternici, abrazivi, înălbitor, benzină sau orice solvenți (risc de deteriorare a scaunului, defecte vizibile și, în consecință, pierderea drepturilor de garanție).
- **Verificați în mod sistematic:**
 - strângerea șuruburilor fluture
 - Starea știfturilor de blocare
 - starea tuburilor (pentru fisuri)

Se recomandă inspectarea regulată a capacelor de cauciuc. Dacă este uzat, înlocuiți capacul cu unul nou.

7. Date privind garanția

Toate produsele distribuite de compania noastră sunt acoperite de o garanție, ale cărei condiții sunt descrise în certificatul de garanție pe care l-ați primit la cumpărare. Am dori să subliniem, de asemenea, că trebuie să păstrați dovada de cumpărare (chitanța sau factura) în scopuri de garanție.

8. Marcarea

	Numărul de referință		Producător
	Numărul lotului		Data producției
	Numărul de serie		Produs medical
	Atenție		Citiți instrucțiunile



Producătorul a evaluat conformitatea cu cerințele
esențiale pentru dispozitivele medicale.

Întreaga ofertă a firmei este disponibilă la distribuitorii noștri. Aflați mai
multe pe pagina de Internet: **www.timago.com**

Vă mulțumim că ați ales Timago !



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2025(I)